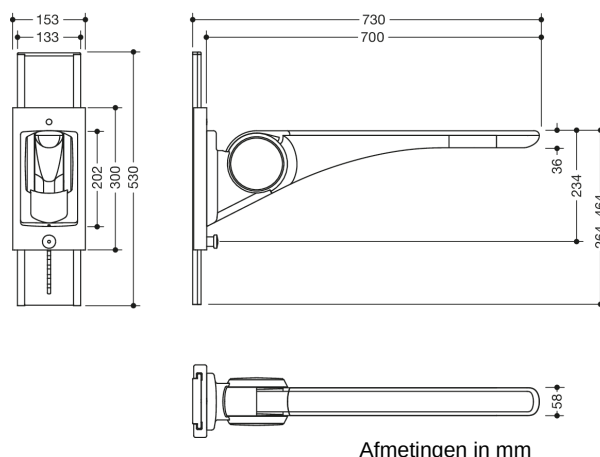




Eigenschappen

Opklapbare steun Basic met hoogteverstelling uit de serie LifeSystem

- stabiele, opklapbare steun met één arm
- Greepkussen antislip en ergonomisch
- dient voor vasthouden, steunen en oprichten
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- maximale productstijfheid verhoogt de stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
- met hoogteverstelling, om de vereiste steunhoogte aan de gebruiker te kunnen aanpassen
- Verstelling naar beneden, vergrendelingsbout uittrekken, verstelling naar boven mogelijk zonder de vergrendelingsbout uit te trekken
- Verstelbereik 200 mm
- eenvoudig naar onder en boven verend opklapbaar
- onderhoudsarm, permanent soepel lopend scharnier, vooraf ingestelde af-fabriek
- een gedefinieerde aanslag voorkomt, dat de opklapbare steun tegen de wand stoot
- Uitzwenking 730 mm, 153 mm breed, wandrail 530 mm hoog
- Greepkussen 58 mm breed
- Houder van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met greepkussen van kunststof in SD (signaalwit, mat) en GU (antraciet, mat) of houder in antraciet, glanzend met greepkussen in TB (signaalwit, mat) DR (antraciet, mat), met hoogglanzend verchromde designelementen
- Hoogteverstelling van aluminium gepoedercoat in HEWI kleur DX (signaalwit, mat)
- Papierrolhouder 802.50.01160, spoeling (draadloos) 802.50.06.. en planchet 802.50.01360 achteraf in te bouwen
- belastbaar tot 100 kg
- eenvoudige montage door afzonderlijke montage van de in hoogte verstelbare plaat
- verborgen, corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart te bestellen)
- afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

-  TB (antraciet hoogglans
-wit mat)
-  SD (wit hoogglanz
-wit mat)
-  GU (wit hoogglanz
-anthrac.grijs mat)
-  DR (antraciet hoogglans
-antraciet mat)