

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

Opklapbare steun, draaibaar van de 801 serie

- met geïntegreerde spoel-/functieknoppen, E-uitvoering
- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, stangen met elkaar verbonden door een verbindingsbocht
- wordt gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - met continue, Corrosiebestendige stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid
- Zilveren metalen knop met blauwe ring wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren, zilvermetalen toets met gele ring voor vrij definieerbare functie (de functietoets voldoet niet aan de eisen voor een notruf volgens DIN VDE 0834-1)
- Spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Bevestiging aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- Verborgen bevestiging
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Uitzwenking 900 mm, 259 mm breed en 78 mm hoog, stangdiameter 33 mm
- gemaakt van mat polyamide in HEWI-kleuren 99 (zuiver wit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)
- Toilethouder 801.50B011 en vloersteunen 950.50.021XA en 950.50.023XA kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601


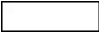


Awards




Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	98 (signaalwit)
	97 (lichtgrijs)
	95 (rotsgrijs)

 92 (antraciegrijs)